

ТОВ «ОЛИС»

Охолоджувач бюкс лабораторний «ОБЛ-1»



ПАСПОРТ
(у тому числі і гарантійний талон)

Гарантійний талон

Заводський номер6077703

Дата продажу

Торгівельна організація

Гарантійні зобов'язання не виконуються у випадку:

1. Відсутність паспорта з гарантійним талоном.
2. Відсутній, змінений або видалений серійний номер охолоджувача.
3. Порушення користувачем вимог паспорта.
4. Пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування і зберігання.
5. Охолоджувач надано в розібраному вигляді або із слідами самостійного відкриття.

Короткий перелік пошкоджень які виключають проведення гарантійного ремонту.

1. Механічне пошкодження кнопки включення.
2. Іржа на деталях.
3. Сліди дії високої температури або відкритого вогню.
4. Зовнішнє пошкодження корпусу.
5. Деталі повністю зношені в результаті інтенсивної експлуатації.
6. Пошкодження штепселя в результаті електричної іскри.
7. Інші пошкодження, які виникли в результаті перевантаження.

Підпис _____

МП

1 Призначення

Охолоджувач буюкс лабораторний (далі Виріб) призначен для охолодження буюкс в яких знаходиться зерно або розмел після сушки в сушильній шафі (СЕС-ЗМУ) та інших пристроях при визначенні вологості зерна в умовах елеваторних, млинарських і заводських лабораторій (див.рис.1).

Даний пристрій не можна використовувати у побутових цілях!

2 Основні технічні характеристики

Електроживлення , В, Гц	220±20; 50
Споживана потужність,ВтI4	
Швидкість обертання вентилятора, об/хв	2450
Тип мережі	1 N~, PE
Клас захисту від ураження електричним током	I
Повітряний потік, м³/час, максимальний	30
Габаритні розміри, мм, не більш :	
довжина	286
ширина	286
висота	102
Вага, кг	2,8

3 Експлуатаційні обмеження.

Виріб зберігати в сухому, провітрюваному приміщенні.

 **До експлуатації допускається персонал , який ознайомився з правилами техніки безпеки і цим паспортом!**

4 Міри безпеки.

Небезпечними факторами ризику для обслуговуючого персоналу є електроживлення вентилятора Виробу, обертання ротора вентилятора , підвищена температура поверхонь буюкс. Забороняється експлуатувати Виріб зі знятою захисною сіткою вентилятора. Установку та зняття буюкс проводити щипцями або термостійкими рукавами.

Розбирання і збірку Виробу проводити при вимкнені Виробу від електричної мережі.

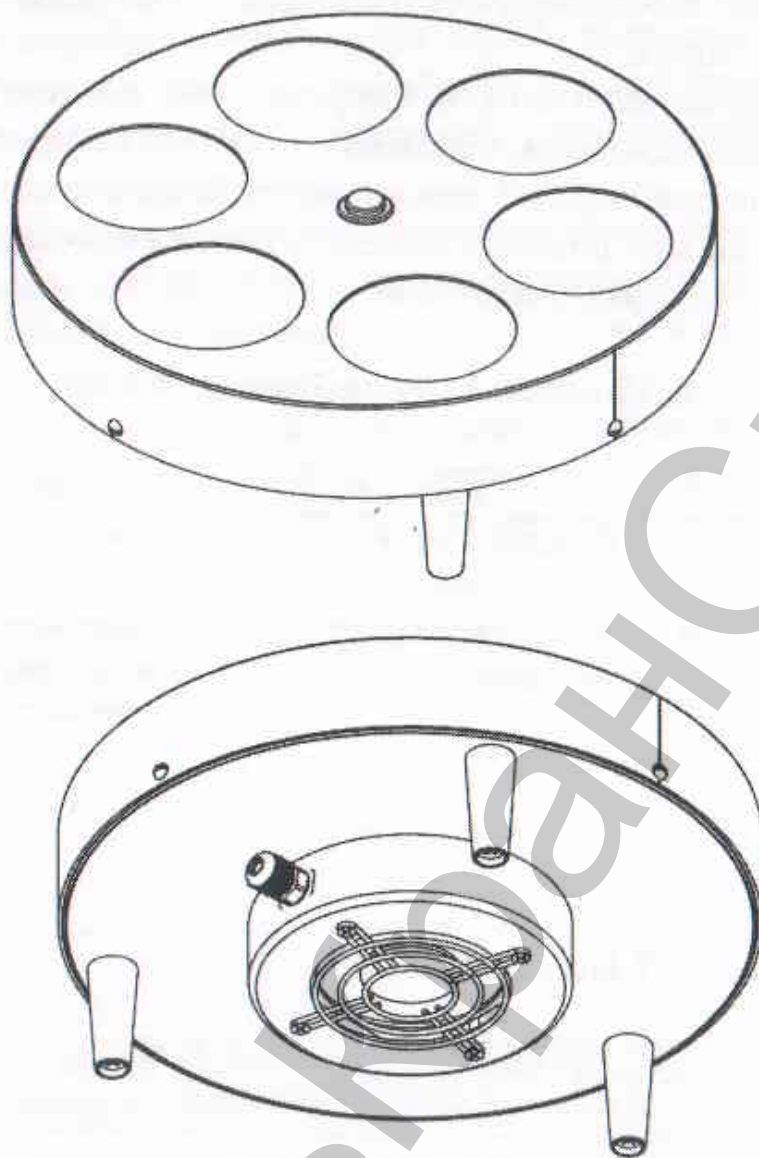


Рис.1 Охладжувач бюкс лабораторний ОБЛ-1.

5 Використання за призначенням.

1. Підключити Виріб в електромережу відповідну технічним характеристикам Виробу.

2. Встановити бюкс, які потребують охолодження в гнізда охолодження по центру кожного гнізда.

3. Ввімкнути охолоджувач кнопкою «мережа», яка розташована в центрі верхньої частини охолоджувача, перевівши кнопку в положення «1».

4. Після закінчення приблизно 5 хвилин зняти бюкс з охолоджувача та вимкнути його, перевівши вимикач мережі в положення «0».

5. Відключити охолоджувач від мережі.

6 Можливі несправності.

Ознаки	Причина	Спосіб усунення
Відсутній потік охолоджуючого повітря	Вийшов з ладу вентилятор Відсутня напруга живлення	Замінити вентилятор Перевірити напругу живлення, ввімкнути в мережу, яка відповідає технічним характеристикам

7 Комплектність.

Позначення виробу	Найменування виробу	Кількість	Заводський номер	Примітка
Складові частини Виробу і зміни в комплектності.				
ОБЛ-1.00.000	Охолоджувач бюкс лабораторний	1	6071703	
Експлуатаційна документація				
ОБЛ-1.00.000 ПС	Паспорт	1	-----	
	Упаковка	1		
Додаткові відомості про комплектність. (додані додатково)				

8 Ресурси, терміни служби і зберігання і гарантії виробника (постачальника).

Ресурс Виробу до першого середнього ремонту 10 тис. год.
Термін служби виробу 10 років, в т.ч. термін зберігання не більш 12 місяців в консервації і упаковці виробника в складських приміщеннях.
В разі постачання Виробу без консервації і (або) упаковки термін зберігання – один місяць.

Вказаний ресурс, термін служби і зберігання дійсні при дотриманні споживачем вимог діючої експлуатаційної документації.

Гарантії виробника (постачальника) – 12 місяців з дня постачання споживачеві.

Гарантійний ремонт Виробу або заміну дефіцитних складових частин в перебігу встановленого гарантійного терміну виконує виробник Виробу ТОВ «ОЛИС» м.Одеса вул.Стовпова 28.

9 Консервація.

(Заповнюється виробником.)

Дата	Найменування роботи	Термін дії, роки	Посада, прізвище і підпис

10 Свідцтво про упаковування.

(Заповнюється виробником.)

Найменування виробу:

Охолоджувач бюкс лабораторний

Позначення: ОБЛ-1.00.000

Заводський номер 6091703

Упаковано згідно вимогам, передбаченим в діючій технічній документації.

Посада пакувальник

Особистий підпис Д.Г.

Розшифровка підпису КОЛІГІН Д.

Число, місяць, рік 05. 2017

11 Свідоцтво про приймання.

(Заповнюється виробником і дистриб'ютором.)

Найменування виробу:

Охолоджувач бюкс лабораторний

Позначення: ОБЛ-1.00.000

Заводський номер 6074703

Виготовлено і прийнято відповідно до обов'язкових вимог державних стандартів, технічній документації, що діє і визнано придатним для експлуатації.

Начальник ВЯ

МП

Особистий підпис

Розшифровка підпису

Рік, місяць, число

Козаровська Т.М.
05.12.17

Дистриб'ютор

Виріб переданий споживачеві:

Рік, місяць, число

МП

Особистий підпис

Розшифровка підпису

12 Рух Виробу при експлуатації.

(Заповнюється споживачем.)

Дата установки	Місце установки	Дата зняття	Напрацювання		Причина зняття	Підпис особи, що проводила установку (зняття)
			з початку експлуатації	після останнього ремонту		

12.1 Обмеження по транспортуванню.

Під час транспортування Виріб не повинен піддаватися дії вологи, сильної вібрації і ударів, а також має бути орієнтований в транспортному засобі, згідно позначення на упаковці. При транспортуванні без упаковки виробника Виріб орієнтувати, як при його роботі, тобто гумовими опорами вниз.

12.2 Прийом і передача Виробу.

(Заповнюється споживачем.)

Дата	Стан Виробу	Підстава (найменування, номер і дата документа)	Підприємство, посада і підпис		Прим.
			Що здав	Що прийняв	

12.3 Зведення про закріплення Виробу при експлуатації.

(Заповнюється споживачем.)

Найменування виробу (складових частин) і позначення	Посада прізвище і ініціали	Підстава (найменування, номер і дата документа)		Прим.
		Закріплення	Відкріплення	

13 Ремонт і облік роботи по бюлетенях і вказівках.

(Заповнюється особою, що проводила роботи.)

Номер бюлетеня (вказівки)	Короткий зміст роботи	Встановлений термін виконання	Дата виконання	Посада, прізвище, підпис	
				Виповнив. роботу	Перевір. роботу

14 Замітки по експлуатації і зберіганню